

仕様

コード番号	ZS-IA3A01	運転音 (無響音室平均)	酸素流量 3L/分:34dB(A) 酸素流量 2L/分:28dB(A) 酸素流量 1L/分:21dB(A)
寸法	高さ590×幅330×奥行293mm		
重量	9.9kg(バッテリー含む)	使用条件	周囲温度 5～40℃ 相対湿度 30～75%(結露のないこと) 使用気圧 900～1,060hPa(標高約1,000mまで)
電源	AC100V(50Hzまたは60Hz)		
消費電力	3L/分…98W 2L/分…63W 1L/分…35W	酸素濃度	88%～95%
	【内蔵バッテリー使用時】電圧 DC25.2V 連続使用時間約60分(3L/分)～180分(1L/分) (新品満充電時、23℃にて測定)	酸素流量(L/分)	0.25/0.5/0.75/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5/3
電撃に 対する保護	クラスIIおよび内部電源機器 B型装着部	警報	【電源供給停止】コンセントランプの点滅と音によりお知らせし、装置が停止 【装置異常】【流量異常】【圧力異常】要連絡ランプの点滅と音によりお知らせし、装置が停止 【酸素濃度低下】濃度低下ランプと酸素ランプの点滅と音によりお知らせ 【バッテリー残量】バッテリー残量モニタと酸素ランプの点滅と音によりお知らせ 【チューブ折れ】チューブ折れランプと酸素ランプの点滅と音によりお知らせ 【火気検知】火気検知ランプと要連絡ランプの点滅と音によりお知らせ

コード番号	ZS-IA5A	運転音 (無響音室平均)	酸素流量 5L/分:32dB(A) 酸素流量 3L/分:27dB(A)
寸法	高さ625×幅350×奥行295mm		
重量	19kg(バッテリー含む)	使用条件	周囲温度 5～35℃ 相対湿度 30～75%(結露のないこと) 使用気圧 900～1,060hPa(標高約1,000mまで)
電源	AC100V(50Hzまたは60Hz)		
消費電力	5L/分…175W 3L/分… 98W	酸素濃度	88%～95%
	【内蔵バッテリー使用時】電圧 DC25.9V 連続使用時間 約40分(5L/分)～70分(3L/分) (新品満充電時、23℃にて測定)	酸素流量(L/分)	0.25/0.5/0.75/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5
電撃に 対する保護	クラスIIおよび内部電源機器 B型装着部	警報	【電源供給停止】コンセントランプの点滅と音によりお知らせし、装置が停止 【装置異常】【流量異常】【圧力異常】要連絡ランプの点滅と音によりお知らせし、装置が停止 【酸素濃度低下】濃度低下ランプと酸素ランプの点滅と音によりお知らせ 【バッテリー残量】バッテリー残量モニタと酸素ランプの点滅と音によりお知らせ 【チューブ折れ】チューブ折れランプと酸素ランプの点滅と音によりお知らせ 【火気検知】火気検知ランプと要連絡ランプの点滅と音によりお知らせ

改良のため予告なしに仕様を変更する場合があります。

酸素ボンベも
安心・安全・快適に

ボンベ交換時の煩わしい作業が一切不要のSPフロー
付きボンベと、軽量・コンパクトでしかも電池長持ちの
SPセーブ-IIが小夏同様、快適なHOTライフをサポート
致します。



流量調整器一体型バルブ
SPフロー



酸素節約装置
SPセーブ-II

エアウォーター・メディカル株式会社

販売：エア・ウォーター・メディカル株式会社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル7階

製造販売業者：株式会社 医器研 〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山2-12-27

販売名：小夏3SP 医療機器認証番号：226ADBZX00229000 特定保守管理医療機器

小夏5SP 医療機器認証番号：229AGBZX00028000 特定保守管理医療機器

エア・ウォーター・メディカル株式会社 2017年6月
17AWM021

酸素濃縮装置

小夏

より快適に、もっとアクティブに



小夏3TM
SP

小夏5TM
SP



火災防止機能



バッテリー搭載

小夏3TM SP

よりアクティブに。

もっと活動的な毎日を。新しいHOTスタイルのご提案



大型車輪と伸縮ハンドルで移動がラクラク。
自宅ではもちろん、各種施設内での使用にも便利です。

小夏5TM SP

より快適に。

クラス最軽量／安心・安全設計



5L酸素濃縮装置として国内最軽量の19kg。
高い省エネ性能と静音設計で、
より快適なHOTライフをサポート致します。

小夏シリーズの特長

1 小夏シリーズの特長

安心のバッテリーバックアップ

Battery Backup

バッテリー搭載

不意の停電や災害時にも安心のバッテリーを内蔵。

特に小夏3SPはカートリッジ式のバッテリーなので、稼働時間を簡単に延長させることができます。

小夏のバッテリー運転時間(目安)

流 量	1.0L/分	2.0L/分	3.0L/分	4.0L/分	5.0L/分
小夏5 TM SP	約120分	約100分	約70分	約50分	約40分
小夏3 TM SP	約180分	約100分	約60分	—	—

2 小夏シリーズの特長

安心への配慮「火災防止機能」




火災防止機能

在宅酸素療法実施中の患者様の火災による重篤な健康被害
が後を絶ちません(右図参照)。

小夏シリーズは、鼻カニューラや延長チューブに引火し、本体
の酸素出口部の温度上昇を検知すると、自動的に酸素の
供給を停止する機能を搭載しました。

在宅酸素療法中の火災による
重篤な健康被害・死亡事故例の原因

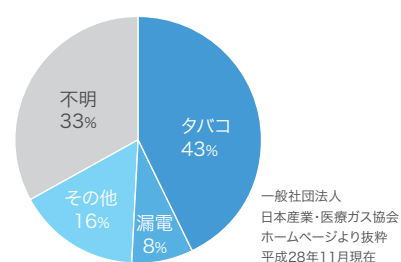

3 小夏シリーズの特長

軽量でコンパクト

小夏シリーズはいずれも軽量・コンパクト。
小夏3SPは重量9.9kg、小夏5SPは19kgと
バッテリーを搭載しながらも軽量化を達成。
家庭内でも簡単に移動できるから、室内掃除
もラクラクできます。




4 小夏シリーズの特長

静音 & 省エネ設計


小夏シリーズは、長く使うものだからこそ、運転音と省電力化にもこだわっています。
長期療養時でも快適にご使用頂けます。

1ヶ月あたりの電気代負担

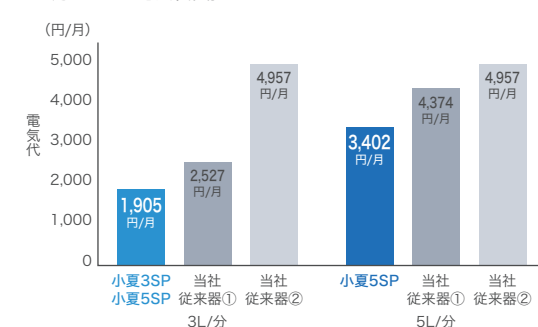

※1kWh27円(税込) (社)全国家庭電気製品公正取引協議会「新電力目安単価」で計算

小夏3SP運転音

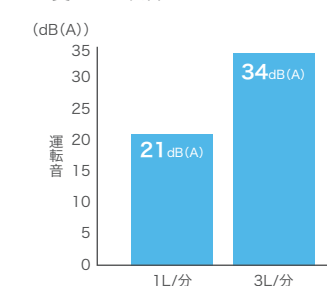

小夏5SP運転音

